


T&P-Systembad *Temperature & Pumps*

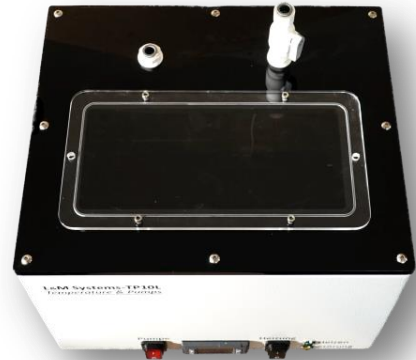

L&M Systems-TP 10 L

Wir vereinen Temperierung und Förderung von Fluiden nach Ihren Wünschen.

Arbeitstemperatur min.	°C	37
Arbeitstemperatur max.	°C	40
Umgebungstemperatur min.	°C	5
Umgebungstemperatur max.	°C	35
Temperaturkonstanz	+/-K	0,2
Schnittstelle		RS-485
Heizleistung	W	200
Badvolumen min.	L	4
Badvolumen max.	L	10
Badöffnung Breite	mm	290
Badöffnung Tiefe	mm	230
Badtiefe	mm	200
Abmessungen (BxTxH)	mm	370x330x270
Förderdruckhöhe max.	m	1,25
Förderstrom max. (Druck)	L/h	150-800
Pumpenanschluss	mm	Ø 10
Elektr. Anschluss	V	230

KONTAKTIEREN SIE UNS:

L&M Systems
Telefon: +49 (0)1781350439
E-Mail: info@l-m-systems.de
www.l-m-systems.de

✓ DIN EN ISO 14801

Mit der TP-Baureihe hat L&M Systems ein Wärmebad entwickelt, welches speziell auf die Anforderung aus der DIN EN ISO 14801 für Ermüdungsprüfungen an Zahn-Implantaten ausgerichtet ist.

✓ 100% Korrosionsbeständig

Das korrosionsbeständige Becken erlaubt ein direktes Erwärmen der für die In-Vivio-Prüfungen benötigten physiologischen Medien, wodurch eine stabile und energieeffiziente Temperaturregelung ermöglicht wird.

✓ 2-in-1

Neben der integrierten Heizung können mehrere schaltbare und regulierbare Pumpen integriert werden. Somit können mehrere Prüfbecken mit dem erwärmten Medium versorgt werden. Das T&P Systembad zeichnet sich durch eine einfache Installation und intuitive Bedienung aus.

✓ Dauereinsatz

Mit der elektrischen Temperatur- und Temperaturüberwachung ist das T&P Systembad bestens für den sicheren Einsatz von langen Prüfzeiten geeignet.